


Dragon 220 電子點火式本生燈

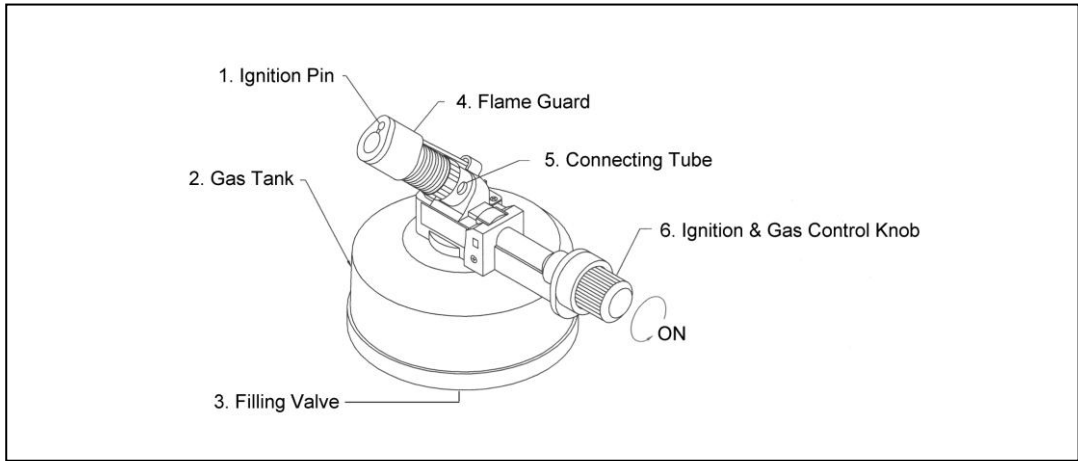

注意：在銷售時瓦斯爐中未充灌瓦斯，使用前請先依說明灌入純淨丁烷瓦斯。

一. 充灌瓦斯

- 1). 檢查**瓦斯控制鈕** ⑥，確定已經在關閉位置，反轉瓦斯爐使爐底朝天。
- 2). 將瓦斯罐的充氣嘴垂直插入**充氣閥** ③ 中央孔中，壓緊瓦斯罐。
- 3). 等待有大量瓦斯從充氣閥溢出時即已完成瓦斯充灌。

注意

1. 請在通風良好的地方充灌瓦斯。
2. 切勿在高溫熱源或明火附近充灌瓦斯。
3. 如果是使用後重新充灌瓦斯，請待瓦斯爐體的溫度降低後再充灌。

二. 點火

- 1). 將紅色**瓦斯控制鈕** ⑥ 向左旋轉約 90 度。
- 2). 壓入紅色**瓦斯控制鈕** ⑥ 即可點著爐火。

三. 調整火焰大小

- 1). **瓦斯控制鈕** ⑥ 向左旋轉可以加大火焰。
- 2). **瓦斯控制鈕** ⑥ 向右旋轉可以關小火焰。


四. 熄火

將**瓦斯控制鈕** ⑥ 向右旋轉到底並略用力鎖緊即可熄滅爐火。

五. 注意事項

- 1). 請勿將瓦斯爐儲存在溫度超過攝氏 50 度的處所。
- 2). 切勿讓瓦斯爐自高處摔落堅硬的地面。
- 3). 切勿自行分解組裝瓦斯爐。
- 4). 切勿任由兒童把玩以免造成危險。

Dragon 220 TILT HEAD LAB BURNER

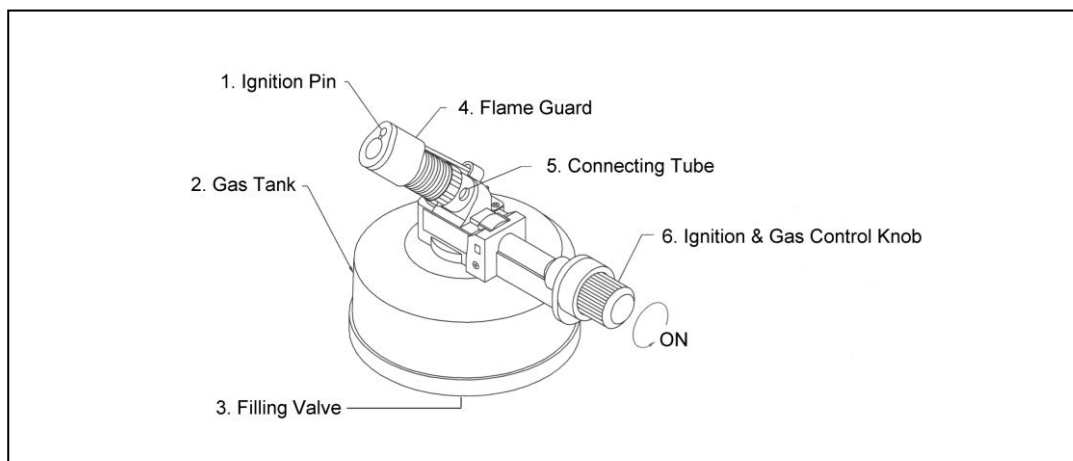

ATTENTION: This unit does not contain any butane gas when purchased. Please follow below to make it operational.

1. FUEL FILLING AND REFILLING

- a) Make sure the gas burner is switched off before filling.
- b) Reverse the unit upside down,
- c) Insert the container's nozzle vertically in a downward motion into the FILLING VALVE ③ on the bottom of the unit.
- d) When the fuel begins to overflow, remove the nozzle from the filling valve to stop the filling operation. It means the unit is full of gas.
- e) Allow a few minutes for the fuel to stabilize in the fuel tank.

2. IGNITION

- a) Please adjust the position of Air Control Sleeve to align the small hole on the sleeve with the hole on the CONNECTING TUBE. ⑤
- b) Turn the IGNITION BUTTON ⑥ to the left (counterclockwise) about 90 degree.
- c) Press the IGNITION BUTTON ⑥ to light the flame.

3. SHUT-OFF

Turn the IGNITION BUTTON ⑥ to right (clockwise) to decrease until the end to shut off the flame.

4. FLAME LENGTH ADJUSTMENT

After the ignition, adjust the CONNECTING TUBE ⑤ to adjust the flame shape.

5. WARNING

- a) Do not touch FLAME GUARD ④ when hot.
- b) Keep out of reach of children.
- c) Do not drop. Do not operate or store in temperature exceeding 50°C.
- d) Do not try to disassemble the unit.