


Specification

- 最大真空度 : 540 mmHg
- 最大流量 (空氣) : 2.2 LPM
- 最大流量 (水) : 0.5 LPM
- 重量 : 1.16 Kg
- 電壓 : DC 12 V, 1.5A,
- 變壓器 : 100-240VAC, 50/60Hz
- 適用環境溫度 : 5 - 40 °C
- 尺寸 : 170 x 120 x 96 mm (LxWxH)
- 材料 :
- 外殼 - stainless steel with powder painting
- 閥片 - EPDM(Ethylene Propylene Diene Monomer)
- 隔膜 - EPDM(Ethylene Propylene Diene Monomer)
- 進出氣接頭 - Stainless steel #316
- O-ring - FKM
- 排水軟管 - silicon , Ø4/Ø8mm, 2 meter.

Features

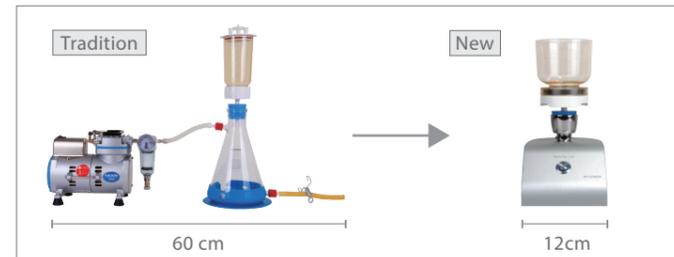


➤ 節省空間: 模組化設計, 不需安裝廢液瓶, 可節省70%的使用空間



➤ 節省時間: 過濾後廢液可直接排到水槽, 增加實驗效率



➤ 更簡單的操作: 操作過程簡單, 將濾膜放上過濾座後, 只需要按下開關按鍵, 就能完成過濾

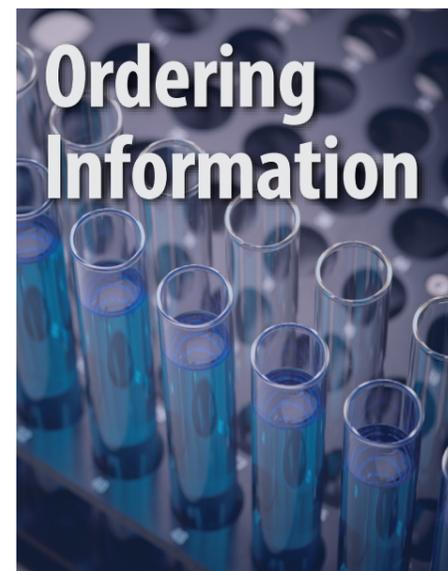

190110-01/02	WaterVac 100-MS 真空過濾系統
190120-01/02	WaterVac 100-MB 真空過濾系統
190130-01/02	WaterVac 100-MF 真空過濾系統
190100-10	不鏽鋼矽膠塞座組_短
190100-20	不鏽鋼旋卡基座組
190100-30	磁式漏斗基座組
190100-71	不鏽鋼矽膠塞座組_長
190100-73	Millipore 基座組
190100-74	Sartorius 基座組
190100-75	Pall 基座組
190100-76	插心接頭基座組
167100-31	濾膜墊片
167103-61	100ml 不鏽鋼過濾杯
167103-63	300ml 不鏽鋼過濾杯
167103-65	500ml 不鏽鋼過濾杯
200300-30	300ml 磁式漏斗上杯組
200500-30	500ml 磁式漏斗上杯組
200300-36	磁式漏斗杯蓋組
OR-AS012-FP	過濾基座氣密環
167100-20	Pall A/E 玻璃纖維濾紙 (1µm), 100/PK
167100-52	Pall GN-6 MCE 濾膜 (0.45µm), 200/PK

Distributor

ROCKER

洛科儀器股份有限公司
 新北市林口區竹林路6號6樓
 Tel: 02-26033311 Fax: 02-26036622
 高雄市苓雅區光華一路206號19F-6
 Tel: 07-2273358 Fax: 07-2273716

WaterVac 100 直接排水式 真空過濾系統



觀看影片



WaterVac 100 vacuum filtration system

Introduction

WaterVac 100 是一套獨特的真空過濾系統, 其簡化了利用膜過濾法所需要的步驟與設備, 節省了70%以上的桌面使用空間, 並且加速整體的實驗流程。創新的直覺性設計讓過濾流程不需要安裝抽吸瓶, 就可以直接過濾樣品, 並將不需要的廢水直接排到水槽內。多功能的平台設計, 讓主機可以更換過濾座以配合樣品所需, 搭配合適的過濾漏斗。過濾座還可安裝符合各大品牌的拋棄式漏斗杯座, 讓各種過濾實驗及微生物檢測更加方便快速。

Applications

- 微生物檢測的各種水樣前置處理
- 工廠、河川及飲用水懸浮固形物檢測
- 各種實驗室常用之真空過濾

Benefits:

- 模組化設計, 節省了70%的桌面使用空間
- 直覺性操作方法, 真空過濾不再需要安裝廢液瓶
- 過濾後廢液可直接排到水槽, 增加實驗效率
- 創新多功能平台, 能安裝各種類型的過濾漏斗
- 能搭配各大廠牌拋棄式漏斗, 加速微生物檢測流程



WaterVac 100 + 拋棄式過濾漏斗



WaterVac 100 + 不鏽鋼過濾漏斗



WaterVac 100 + 磁式過濾漏斗

如何選擇適合的 WaterVac 100 產品組合

步驟 1,
選擇 WaterVac 100
主機和濾杯基座



步驟 2,
選擇適合的
過濾漏斗或過濾杯

